


操作  
简单、安全


缩短手术时间

Minimalism in Sinus

**DASK** *Simple*

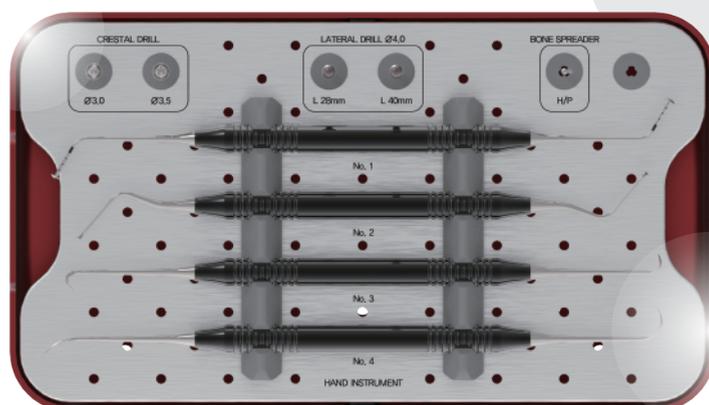




**Dentium** 登腾

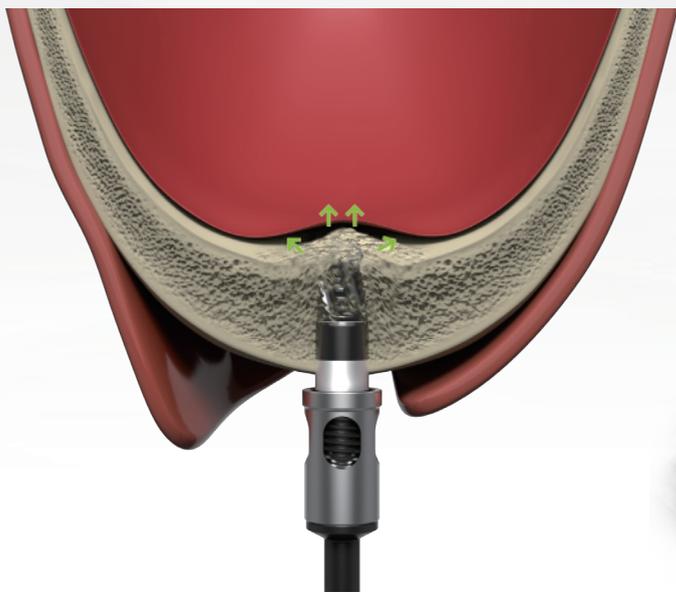

### 收集骨屑&提升

安全、简单、高效  
降低穿孔风险

50rpm 70Ncm, 无伴冷冲

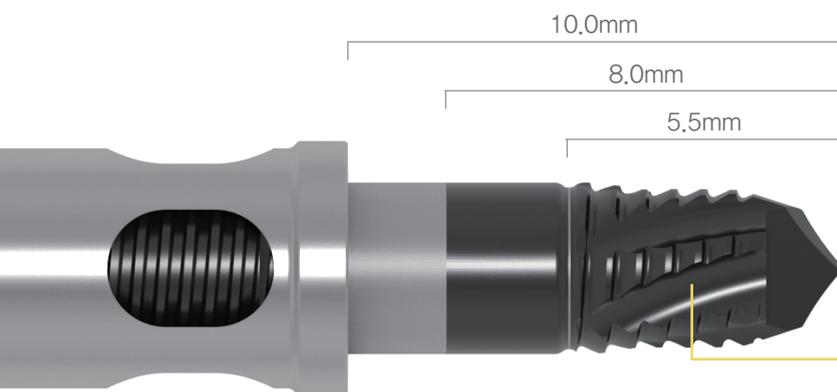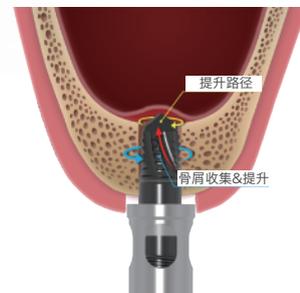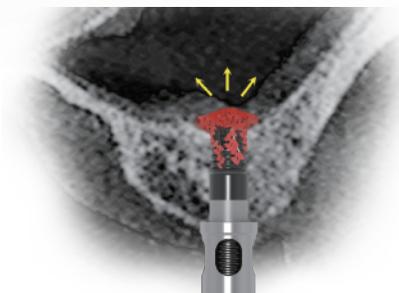

自体骨收集


反向切割

- 收集骨屑并提升至窦腔
- 骨挤压


自停卡环

可调范围: 4~10mm


上颌窦底内提升

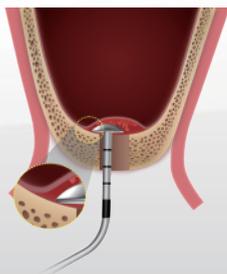


上颌窦底内提升

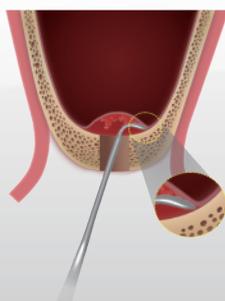

穹型窦匙

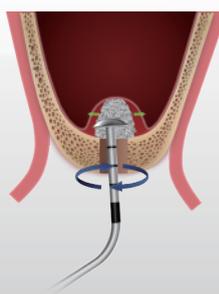

骨扩散器

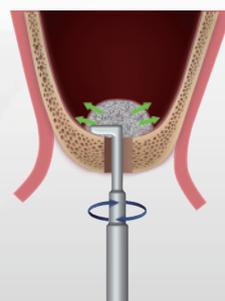

# DASK Simple


## 上颌窦外提升

NEW




✓ 提高了使用舒适性和  
易操作性

可从各个角度研磨侧壁

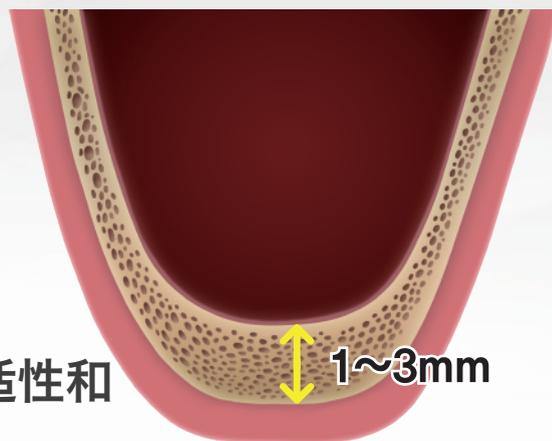


✓ 垂直向研磨&水平向  
研磨都易操作

1,000rpm 30~45Ncm,带冲洗

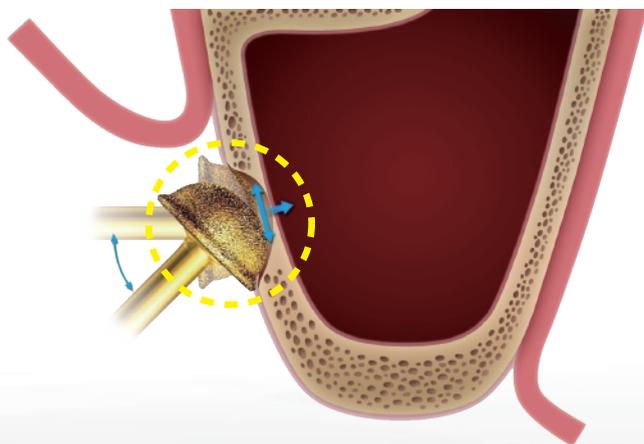


DASK  
Ø6.0~8.0

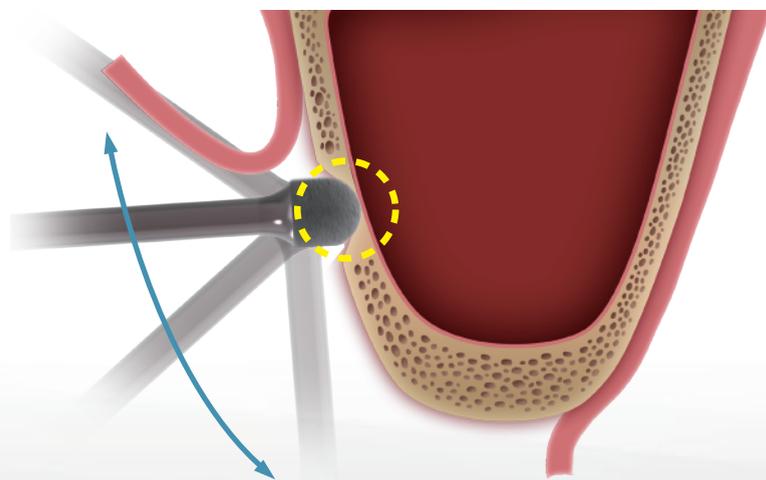

DASK simple  
Ø4.0

## 详细规格

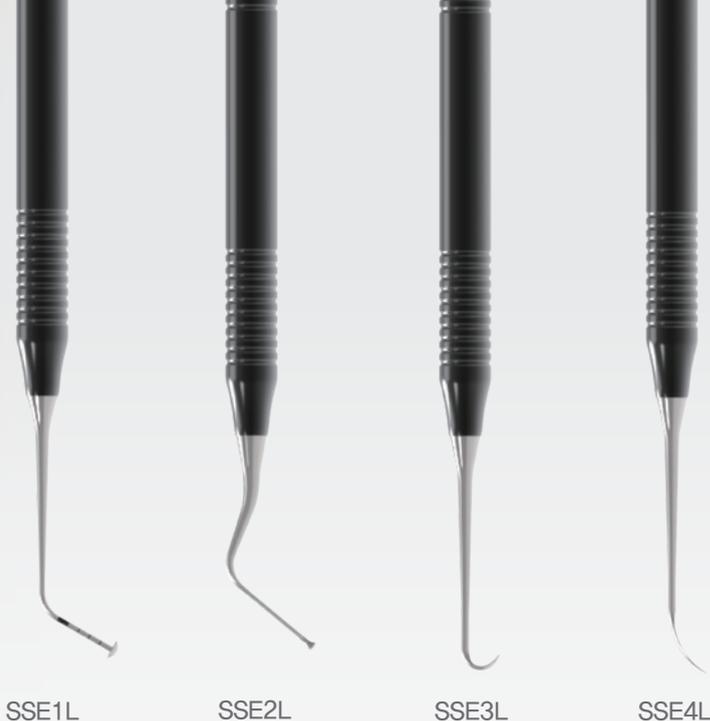

SSE1L

SSE2L

SSE3L

SSE4L

### 内提升用钻



35.0mm

Ø3.0

Top view



直径  
Ø 3.0

\*推荐使用次数50次



35.0mm

Ø3.5

| 直径   | L      | 型号        |
|------|--------|-----------|
| Ø3.0 | 35.0mm | SRT3035AS |
| Ø3.5 | 35.0mm | SRT3535AS |

### 外提升用钻



28.0mm

Ø4.0

\*推荐使用次数40次


| 直径   | L      | 型号      |
|------|--------|---------|
| Ø4.0 | 28.0mm | SLD0428 |
| Ø4.0 | 40.0mm | SLD0440 |



40.0mm

Ø4.0

### 骨扩散器

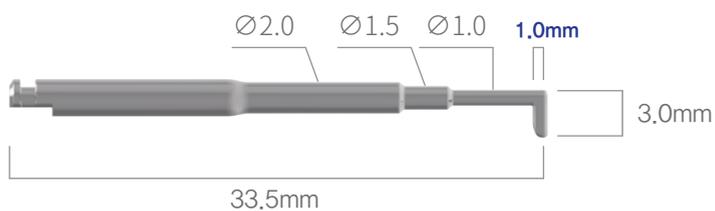

33.5mm

3.0mm

| 直径   | L      | 型号     |
|------|--------|--------|
| Ø5.0 | 33.5mm | SSP33H |